



Gebrauchsanleitung

Nur für in-vitro-Diagnostik bestimmt!

Die Vivapore-Konzentratoren zur Aufkonzentrierung und/oder Reinigung von Makromolekülen aus verdünnten Lösungen sind außerordentlich leicht zu handhaben. Je nach Konfiguration und Reservoirvolumen des verwendeten Vivapore-Konzentrators reichen die Ausgangsvolumina von 0,5 bis 20 ml, und es lässt sich eine bis zu 750-fache Konzentration erzielen.


Betrieb

1. Konzentrierung von Makromolekülen

a. Vivapore 5 oder 10 | 20 in den Ständer einsetzen. Für Vivapore 2 ist kein Ständer erforderlich.

b. Die Probe oben durch die Öffnung pipettieren. Der Konzentrator kann bis zum Erreichen des gewünschten Konzentrationsniveaus unbeaufsichtigt stehen gelassen werden. Lösungsmittel und Mikromoleküle werden von einem Absorbens hoher Kapazität durch die Membran gezogen; die integrierte Dead-Stop-Funktion verhindert, dass die Probe bis zur Trockene aufkonzentriert wird.

c. Ist das gewünschte Volumen erreicht, wird das Konzentrat mit einer Pasteur-, einer dünnen Kunststoff- oder mit einer zum Beladen von Gelen geeigneten Pipette (Gel Loader) abgezogen. Die Probe kann nun in weiteren Analysen eingesetzt werden.

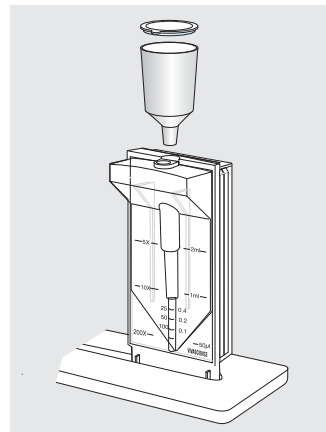

2. Kapazitätserweiterung bei Vivapore 10 | 20 auf 20 ml

Durch Einsatz eines zusätzlichen Probenreservoirs lässt sich die Probenkapazität des Vivapore 10 | 20 auf 20 ml erhöhen. Dazu werden zunächst 10 ml in den Probenbehälter pipettiert; anschließend wird das zusätzliche Probenreservoir auf die obere Öffnung aufgesteckt. Nun können weitere 10 ml der Probe zugegeben werden.


3. Entsalzen mit Vivapore 2 oder Vivapore 10 | 20

Erweiterung des Probenreservoirs oder Entsalzen durch kontinuierliche Diafiltration. Sowohl Vivapore 10 | 20 als auch Vivapore 2 können zusätzlich mit einem neuartigen Probenreservoir aufgerüstet werden. Auf diese Weise kann das Probenvolumen erweitert bzw. die Reinigung und Aufkonzentrierung von Proteinproben in einem Schritt durchgeführt werden. Dabei wird das ursprüngliche Lösungsmittel durch eine frische Pufferlösung ersetzt, und zwar mit einer der Filtrationszeit entsprechenden Geschwindigkeit. Durch die neue Pufferlösung, die ein fünfmal größeres Volumen aufweist als die Probe im Konzentrator, lassen sich 99% der Salze entfernen.

A. Pipettieren Sie bis zu 2 ml der zu reinigenden Probe durch die obere Öffnung des Konzentrators.

B. Stecken Sie eine 10-ml-Kunststoffpipette oder das zusätzliche Probenreservoir fest auf die konisch geformte obere Einlassöffnung des Konzentrators auf. Füllen Sie dann deionisiertes Wasser oder frische Pufferlösung bis zur fünffachen Menge des im Konzentrator befindlichen Probenvolumens auf. Während das Lösungsmittel in der ursprünglichen Lösung durch die frische Pufferlösung ersetzt wird, kann der Konzentrator unbeaufsichtigt stehen bleiben. Ist der Puffer in der Pipette aufgebraucht, wird die restliche Lösung weiter bis zum gewünschten Niveau aufkonzentriert.

C. Die gereinigte und konzentrierte Probe kann nun mit einer Pasteur- oder einer langen, zum Beladen von Gelen geeigneten Pipette abgezogen werden.

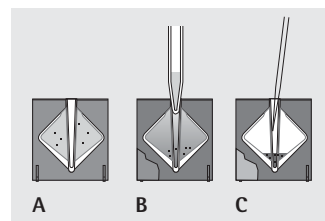

Benutzungshinweise

Verkürzung der Konzentrierungszeit

Die Filtrationsgeschwindigkeit wird durch verschiedene Parameter beeinflusst, u.a. durch die Temperatur, den pH-Wert und die Proteinkonzentration. Zwar gestatten die Vivapore-Konzentratoren in den meisten Fällen kurze Filtrationszeiten. Um die Filtrationsgeschwindigkeit zu optimieren, können allerdings nachfolgende Hinweise von Nutzen sein.

Die Filtrationsgeschwindigkeit nimmt proportional zur Umgebungstemperatur zu. Wenn für Ihre Anwendung eine schnellere Konzentrierung erforderlich ist, sollten Sie den Konzentrator also in der Nähe einer Wärmequelle aufstellen.

Die Konzentrierung saurer Proben mit pH-Werten < 5 dauert länger als bei neutralen Proben. Durch die Einstellung auf einen physiologischen pH-Wert kann die Filtrationsgeschwindigkeit erhöht werden.

Suspendierte Partikel neigen dazu, das Filterelement zu verunreinigen und dadurch die Filtrationsgeschwindigkeit zu verringern. Durch Vorfiltration mit einem Spritzenfilter kann die Probe geklärt werden. Dies wiederum führt zu kürzeren Filtrationszeiten und zur Verbesserung der Analyseergebnisse im Anschluss an das Aufkonzentrieren.

Die Proteinkonzentrationen vor der Aufkonzentrierung haben einen signifikanten Einfluss auf die Konzentrationsgeschwindigkeit. Während sich eine stark verdünnte Probe in kurzer Zeit aufkonzentrieren lässt, nimmt die Filtrationsgeschwindigkeit rapide ab, wenn die Konzentration der Makromoleküle mehr als 2 % beträgt.

Für Konzentrierungen auf über 5 % sind die Vivapore-Konzentratoren nicht geeignet. (Um eine höhere Makromolekül-Konzentration zu erzielen, empfehlen wir die Verwendung von Vivaspin-Zentrifugalkonzentratoren.)

Rückgewinnung trockener Proben

Die Vivapore-Konzentratoren sind mit einer undurchlässigen Dead-Stop-Konzentrattasche ausgestattet, die ein Aufkonzentrieren der Probe bis zur Trockene verhindert. Verbleibt das Konzentrat allerdings versehentlich zu lange im Konzentrator, kommt es unter Umständen zu einer Verdunstung des restlichen Lösungsmittels, so dass die Probe doch zur Trockene aufkonzentriert wird. In einem solchen Fall lassen sich die Proteine wieder in Lösung bringen, indem man ca. 100 µl Pufferlösung mehrfach in die Konzentrattasche hinein- und wieder herauspipettiert.

Lagerung

Die Vivapore-Konzentratoren sollten bei 4°C bis 30°C in einer trockenen Umgebung aufbewahrt werden.

Entsorgung

Benutzte Konzentratoren können verbrannt oder autoklaviert und die Ständer für weitere Konzentrierungen benutzt werden.



Vivapore 2, 5, 10 | 20 ml C€

Directions for Use

Intended only for in-vitro diagnosis

Vivapore Concentrators offer exceptional ease of use and flexibility for the concentration and/or purification of macromolecules from dilute solutions. Depending on configuration and reservoir volume of the Vivapore selected, starting volumes may vary from 0.5 to 20 ml and up to 750 concentration may be achieved.


Operation

1. Concentrating macromolecules

a. Insert Vivapore 5 or 10 | 20 into stand. Vivapore 2 is self-supporting.

b. Pipette sample through aperture at the top of the device. Device can be left unattended until desired concentration is achieved. Solvent and micromolecules are pulled through the membrane by a high-capacity absorbent; a dead stop feature prevents the sample from concentrating to dryness.

c. Once the desired volume is achieved, the concentrate is withdrawn using a Pasteur, thin plastic or gel loader type pipette. The sample is now ready for further analysis.

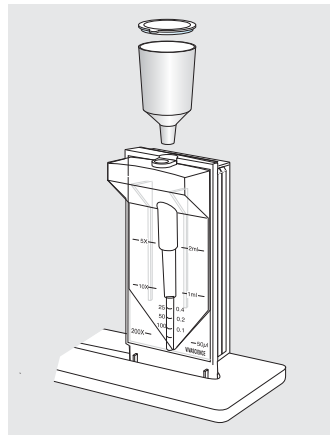

2. 20 ml capacity expansion for the VP10 | 20

Sample capacity of the VP10 | 20 can be increased to 20 ml by use of the ancillary reservoir. First pipette 10 ml into the Vivapore, then lock the ancillary reservoir to the top opening and add up to an additional 10 ml of sample.

3. Desalting with either Vivapore 2 or Vivapore 10 | 20


Reservoir expansion or desalting by constant volume diafiltration. Both the VP10 | 20 and Vivapore2 offer a unique ancillary reservoir feature that allows reservoir expansion or one-step purification and concentration of protein samples.

In this procedure, new buffer solution replaces the original solvent at a rate equal to the speed of filtration. With a fresh buffer solution volume that is five times greater than the sample in the concentrator, 99% of salts will be removed.

A. Pipette up to 2 ml of sample to be purified through aperture at the top of the device.

B. Firmly seat a 10 ml plastic pipette or the ancillary reservoir on the conical entry port of the concentrator. Fill with up to 5 times the volume in the concentrator using deionized water or fresh buffer solution. Device can be left unattended whilst the new buffer replaces the solvent in the original solution. Once buffer in the pipette is exhausted, the remaining solution will continue to concentrate to the level desired.

C. Collect purified and concentrated sample with a pasteur or long gel loader type pipette.

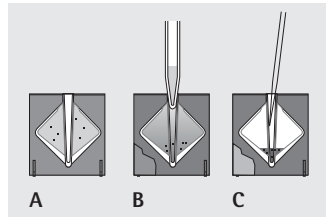

Operating Tips

Improving speed of concentration

Speed of filtration is affected by several parameters including temperature, pH and protein concentration. Whilst Vivapore concentrators will provide rapid filtration in most environments, the following suggestions may be helpful in optimising speed.

Filtration speed will increase proportionally to ambient temperature. Should you require faster concentration, place the concentrator near a source of heat.

An acid sample with a pH of less than 5 will take longer to concentrate than a neutral sample. Adjustment to a physiological pH will result in faster filtration.

Suspended particles will tend to foul the filter element and slow filtration speed. Prefiltration with a syringe filter will clarify the sample and result in faster filtration speed and improved analytical results following concentration.

Initial protein concentration levels will have a significant effect on concentration speed. Whilst a highly dilute sample will concentrate rapidly, once macromolecule concentration exceeds 2%, the speed of filtration will rapidly decrease.

Concentrations above 5% are not practical with Vivapore concentrators. (For high levels of macromolecular concentration, use Vivaspin centrifugal concentrators.)

Recovering dry samples

Vivapore concentrators have an impermeable concentrate pocket (dead stop) which impedes concentration to dryness. However, if the concentrate inadvertently remains too long in the concentrator, the remaining solvent will eventually evaporate and the sample may go to dryness. Should this occur, proteins may be returned to solution by pipetting approximately 100 µl of buffer in and out of the concentrate pocket several times.

Storage

Vivapore devices should be stored in a dry environment at 4 to 30°C.

Disposal

Used units may be incinerated or autoclaved, the stands are reusable for further concentrations.

Vivapore 2, 5 et 10 | 20 ml C€

Mode d'emploi

Pour diagnostic in vitro uniquement.

Les concentrateurs Vivapore sont caractérisés par une utilisation extrêmement facile et par une très grande flexibilité lors de la concentration et/ou de la purification de macromolécules dans des solutions diluées. En fonction de la configuration et du volume du réservoir du concentrateur Vivapore utilisé, les volumes de départ peuvent varier entre 0,5 et 20 ml et il est possible d'atteindre une concentration allant jusqu'à 750 fois.


Fonctionnement

1. Concentration de macromolécules

a. Insérer Vivapore 5 ou 10 | 20 dans le support. Pour Vivapore 2, aucun support n'est nécessaire.

b. Pipetter l'échantillon à travers l'orifice se trouvant dans le haut du dispositif. Le concentrateur peut être laissé sans surveillance jusqu'à ce que le niveau de concentration souhaité soit atteint. Le solvant et les micromolécules sont attirés à travers la membrane par un absorbant de capacité élevée ; une fonction dead stop intégrée empêche que l'échantillon ne soit concentré jusqu'à sécheresse.

c. Lorsque le volume souhaité est atteint, retirer le concentré avec une pipette Pasteur, une fine pipette en plastique ou une pipette pour gel (gel loader). L'échantillon peut désormais être utilisé pour d'autres analyses.

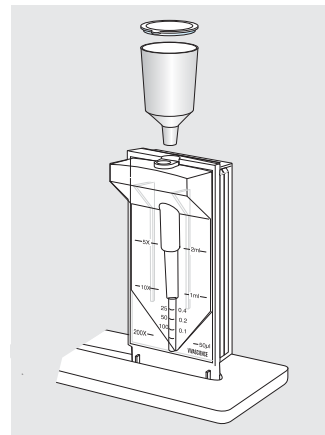

2. Extension à une capacité de 20 ml de Vivapore 10 | 20

La capacité d'échantillon de Vivapore 10 | 20 peut être augmentée à 20 ml grâce à l'utilisation d'un réservoir à échantillon supplémentaire. A cet effet, il faut d'abord pipetter 10 ml dans le Vivapore, puis placer le réservoir supplémentaire sur l'ouverture supérieure. Il est alors possible d'ajouter 10 ml d'échantillon supplémentaire.

3. Dessalement avec Vivapore 2 ou avec Vivapore 10 | 20


Extension du réservoir ou dessalement par une diafiltration à volume constant. Les concentrateurs Vivapore 10 | 20 et Vivapore 2 peuvent être équipés d'un réservoir à échantillon supplémentaire unique en son genre. Il est ainsi possible d'augmenter le volume du réservoir ou d'effectuer la purification et la concentration d'échantillons protéiques en une seule étape. Lors de cette procédure, une nouvelle solution tampon remplace le solvant d'origine à un taux égal à la vitesse de la filtration. La nouvelle solution tampon, dont le volume est cinq fois supérieur à celui de l'échantillon dans le concentrateur, permet d'éliminer 99% des sels.

A. Pipetter jusqu'à 2 ml de l'échantillon à purifier à travers l'orifice supérieur du concentrateur.

B. Fixer une pipette en plastique de 10 ml ou le réservoir supplémentaire sur l'ouverture supérieure conique du concentrateur. Ajouter ensuite un volume d'eau désionisée ou de nouvelle solution tampon représentant cinq fois le volume de l'échantillon se trouvant dans le concentrateur.

Pendant que la nouvelle solution tampon remplace le solvant dans la solution d'origine, le concentrateur peut être laissé sans surveillance. Lorsqu'il n'y a plus de tampon dans la pipette, le reste de solution continue à se concentrer jusqu'au niveau souhaité.

C. Prélever ensuite l'échantillon purifié et concentré avec une pipette Pasteur ou avec une longue pipette pour gel (gel loader).

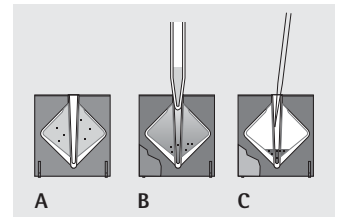

Conseils d'utilisation Réduction de la durée de concentration

La vitesse de filtration dépend de différents paramètres tels que la température, le pH et la concentration protéique. Bien que les concentrateurs Vivapore permettent des filtrations rapides dans la plupart des cas, les conseils suivants peuvent toutefois être utiles afin d'optimiser encore la vitesse de filtration.

La vitesse de filtration augmente proportionnellement à la température ambiante. Si votre application exige une concentration plus rapide, placez le concentrateur près d'une source de chaleur.

La concentration d'échantillons acides d'un pH inférieur à 5 dure plus longtemps que celle d'échantillons neutres. Le réglage sur un pH physiologique peut donc augmenter la vitesse de filtration.

Des particules en suspension ont tendance à salir l'élément filtrant et donc à ralentir la vitesse de filtration. Une préfiltration avec un filtre seringue permet de clarifier l'échantillon et donc d'accélérer la vitesse de filtration et d'améliorer les résultats d'analyse faisant suite à la concentration.

Les niveaux de concentration protéique avant la concentration ont un effet significatif sur la vitesse de concentration. Tandis qu'un échantillon fortement dilué est très vite concentré, la vitesse de filtration diminue rapidement lorsque la concentration des macromolécules est supérieure à 2%. Les concentrateurs Vivapore ne sont pas adaptés à des concentrations de plus de 5% (pour des concentrations macromoléculaires plus élevées, nous recommandons d'utiliser des concentrateurs centrifuges Vivaspin).

Récupération d'échantillons secs

Les concentrateurs Vivapore sont équipés d'une poche à concentré imperméable (dead stop) qui empêche une concentration de l'échantillon jusqu'à sécheresse. Toutefois, si par inadvertance, le concentré reste trop longtemps dans le concentrateur, il peut arriver que le reste de solvant s'évapore de sorte que l'échantillon se concentre quand même jusqu'à sécheresse. Dans un tel cas, on peut faire repasser les protéines à l'état de solution en mettant et en élevant plusieurs fois environ 100 µl de solution tampon dans la poche à concentré à l'aide d'une pipette.

Stockage

Les concentrateurs Vivapore doivent être conservés dans un endroit sec à une température ambiante allant de 4 à 30°C.

Élimination

Les concentrateurs usagés peuvent être brûlés ou autoclavés. Les supports sont réutilisables pour d'autres concentrations.

Vivapore 2, 5 e 10 | 20 ml C€

Instruzioni per l'uso
Solo per la diagnostica in vitro!

I concentratori Vivapore realizzati per la concentrazione e/o purificazione di macromolecole contenute in soluzioni diluite si contraddistinguono per un'estrema facilità d'uso. In base alla configurazione e alla capacità del serbatoio del Vivapore utilizzato, i volumi iniziali vanno da 0,5 fino a 20 ml e si può raggiungere una concentrazione di 750 volte.


Uso

1. Concentrazione di macromolecole

a. Inserire Vivapore 5 o 10 | 20 nel supporto. Vivapore 2 non richiede un supporto.

b. Pipettare il campione attraverso l'apertura posta in alto. Il concentratore non richiede alcuna sorveglianza fino al raggiungimento della concentrazione desiderata. I solventi e le macromolecole vengono attirati attraverso la membrana filtrante da un materiale assorbente di elevata capacità; una funzione di arresto "Dead-Stop" integrata impedisce che il campione venga concentrato fino allo stato secco.

c. Una volta raggiunto il volume desiderato, il concentrato viene prelevato usando una pipetta Pasteur, una di plastica fine o una adatta per la carica di gel (Gel Loader). Ora il campione può essere impiegato in ulteriori analisi.

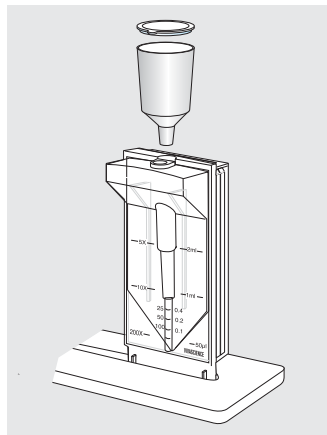

2. Espansione della capacità per Vivapore 10 | 20 a 20 ml

La capacità del campione di VP10 | 20 può essere portata a 20 ml usando un serbatoio supplementare. Innanzitutto si deve pipettare 10 ml nel portacampione, poi viene inserito il serbatoio supplementare nell'apertura in alto e poi si aggiungono altri 10 ml di campione.

3. Desalinizzazione con Vivapore 2 o Vivapore 10 | 20

Espansione del serbatoio oppure desalinizzazione mediante diafiltrazione continua. Entrambi i Vivapore 10 | 20 e Vivapore 2 possono essere equipaggiati con un nuovo tipo di serbatoio supplementare che permette l'espansione del volume di campione o la purificazione e concentrazione dei campioni di proteine in una sola operazione.


Con questa procedura il solvente di origine viene sostituito da una nuova soluzione tampone ad una velocità equivalente al tempo di filtrazione. La nuova soluzione tampone che presenta un volume 5 volte più grande del campione nel concentratore, permette una rimozione del 99% dei sali.

A. Pipettare fino a 2 ml di campione da filtrare attraverso l'apertura in alto del concentratore.

B. Inserire e fissare una pipetta di plastica di 10 ml, oppure il serbatoio supplementare del campione, nell'apertura d'ingresso a forma conica del concentratore. Versare una quantità d'acqua deionizzata o una soluzione tampone fresca, cinque volte maggiore del volume

di campione che si trova nel concentratore. Mentre il solvente nella soluzione di partenza viene sostituito con la soluzione tampone fresca, il concentratore può essere lasciato incustodito. Una volta che la soluzione tampone nella pipetta è esaurita, la soluzione rimanente continuerà ad essere concentrata fino al livello desiderato.

C. Per raccogliere il campione purificato e concentrato, usare una pipetta Pasteur oppure una pipetta lunga adatta a caricare gel.

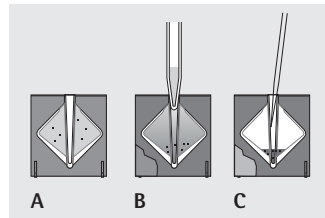

Istruzioni per l'utilizzo Riduzione del tempo di concentrazione

La velocità di filtrazione è influenzata da diversi parametri a cui fanno parte la temperatura, il pH e la concentrazione di proteine. Sebbene i concentratori Vivapore forniscano nella maggioranza dei casi una filtrazione rapida, i seguenti consigli saranno molti utili per ottimizzare la velocità di filtrazione.

La velocità di filtrazione cresce proporzionalmente alla temperatura ambiente. Se l'applicazione richiede una concentrazione più veloce, collocare il concentratore vicino ad una fonte di calore.

La concentrazione di campioni acidi con valori di pH minori di 5 dura più a lungo rispetto ai campioni neutri. Impostando un valore di pH fisiologico, la filtrazione risulterà più veloce.

Le particelle sospese tendono a contaminare l'elemento filtrante rallentando la velocità di filtrazione. Mediante la prefiltrazione con un filtro per siringhe il campione verrà chiarificato ottenendo tempi di filtrazione più brevi e migliorando i risultati di analisi successivi alla concentrazione.

I livelli iniziali di concentrazione di una tasca del concentrato influenzano in misura elevata la velocità di concentrazione. Mentre un campione molto diluito verrà concentrato in breve tempo, la velocità di filtrazione diminuirà se la concentrazione di macromolecole supera il 2%. Le concentrazioni oltre il 5% non sono adatte ai concentratori Vivapore. (Per ottenere livelli elevati di concentrazione macromolecolare, Vi consigliamo di impiegare i concentratori per centrifuga Vivaspin).

Recupero di campioni secchi

I concentratori Vivapore sono dotati di una tasca del concentrato impermeabile (Dead-Stop) che impedisce la concentrazione del campione fino al secco. Se il concentrato rimane inavvertitamente per troppo tempo nel concentratore, si potrà verificare una evaporazione del solvente rimanente con eventuale essiccazione del campione. In tal caso per riportare a soluzione le proteine, pipettare più volte dentro e fuori circa 100 µl di soluzione tampone nella tasca del concentrato.

Stoccaggio

I concentratori Vivapore dovrebbero essere stoccati in un ambiente asciutto ad una temperatura da 4°C a 30°C.

Smaltimento

I concentratori usati possono essere inceneriti o autoclavati; i supporti possono essere usati per ulteriori concentrazioni.

Vivapore 2, 5 y 10 | 20 ml C€

Instrucciones de uso
Para uso exclusivo de diagnóstico in vitro.

Los concentradores Vivapore ofrecen una facilidad de manejo y una flexibilidad excepcionales para la concentración o purificación de macromoléculas procedentes de soluciones diluentes. Según la configuración y el volumen de reserva del producto Vivapore seleccionado, los volúmenes iniciales van de los 0,5 ml hasta los 20 ml, pudiéndose alcanzar un factor de concentración 750 X.


Manejo

1. Concentración de macromoléculas

a. Inserte el Vivapore 5 o 10 | 20 en el soporte. El modelo Vivapore 2 incorpora su propio soporte.

b. Tome una muestra con la pipeta a través de la abertura superior. No es necesario atender al dispositivo hasta lograr la concentración deseada. Tanto el disolvente como las macromoléculas pasan a través de la membrana gracias a un absorbente de gran capacidad, característica que evita que la muestra se concentre hasta alcanzar el punto de evaporación.

c. Una vez lograda la cantidad deseada, el concentrado se retira empleando una pipeta Pasteur o una pipeta larga de plástico. La muestra ya está lista para proseguir con su análisis.

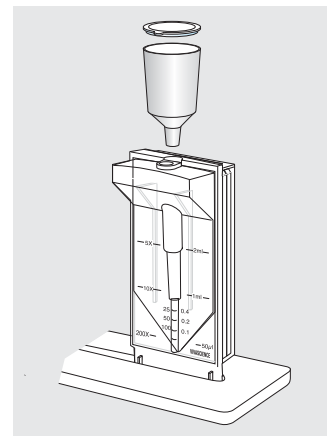

2. Ampliación de 20 ml para el VP 10 | 20

Se puede ampliar la capacidad del VP 10 | 20 hasta 20 ml mediante el suplemento de reserva. En primer lugar, introduzca 10 ml en el Vivapore con la pipeta, a continuación cierre la abertura superior del suplemento de reserva y añada otros 10 ml de la muestra.

3. Desalación con el Vivapore 2 o con el Vivapore 10 | 20


Ampliación de la reserva o desalación mediante un volumen constante de diafiltración. Tanto el VP 10 | 20 como el VP 2 incorporan un suplemento de reserva exclusivo que permite la ampliación de la reserva o la purificación y concentración de muestras de proteínas en un único paso. Mediante este procedimiento, la nueva disolución amortiguadora reemplaza al disolvente original a un ritmo idéntico al de la velocidad de filtrado. Con un volumen de disolución amortiguadora fresca cinco veces superior a la muestra en el concentrador, se elimina cerca del 99% de las sales.

A. Emplee la pipeta para introducir por la abertura superior hasta 2 ml de la muestra a purificar.

B. Coloque firmemente una pipeta de plástico de 10 ml o el suplemento de reserva en la entrada cónica del concentrador. Llénela hasta 5 veces el volumen del concentrador con agua desionizada o con disolución amortiguadora fresca. No es necesario estar pendiente del dispositivo mientras la nueva disolución reemplaza al disolvente de la solución

original. Una vez agotada la disolución amortiguadora de la pipeta, la solución restante seguirá concentrándose hasta los niveles deseados.

C. Recoja la muestra purificada y la muestra concentrada con una pipeta Pasteur o una pipeta larga.

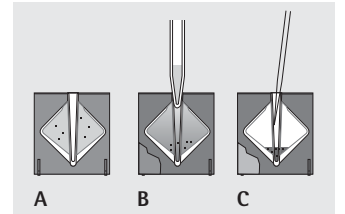

Instrucciones de uso Incremento de la velocidad de concentración

La velocidad de filtrado se ve afectada por diversos parámetros, como son la temperatura, el pH y la concentración de proteínas. Mientras que los concentradores Vivapore le permiten un filtrado rápido en la mayoría de los entornos, las sugerencias siguientes pueden resultarle de utilidad para incrementar la velocidad.

La velocidad de filtrado aumentará proporcionalmente a la temperatura ambiente. En caso de precisar una concentración más rápida, sitúe el concentrador cerca de una fuente de calor.

Una muestra de ácido con un pH inferior a 5 requerirá más tiempo de concentración que una muestra neutra. El ajuste a un pH fisiológico derivará en un filtrado más ágil.

Las partículas en suspensión tienden a obstruir el filtro y ralentizar la velocidad de filtrado. Efectúe un filtrado previo con una jeringuilla para aclarar la muestra a fin de acelerar la velocidad de filtrado y mejorar la analítica posterior a la concentración.

Los niveles iniciales de concentración de proteínas contarán con un efecto significativo en la velocidad de concentración. Si bien una muestra altamente diluida se concentrará con más rapidez, una vez que la concentración macromolecular supera el 2%, la velocidad de filtrado disminuye con celeridad.

Las concentraciones superiores al 5% no resultan eficaces con los concentradores Vivapore. (Cuando precise trabajar con niveles elevados de concentración macromolecular, utilice los concentradores centrifugos Vivaspin.)

Recuperación de muestras secas

Los concentradores Vivapore cuentan con un receptáculo impermeable para el concentrado que impide la concentración de la muestra hasta su evaporación. No obstante, si el concentrado permaneciera largo tiempo en el concentrador, el resto del disolvente terminará por evaporarse y la muestra puede llegar a secarse. Si esto ocurriera, las proteínas pueden devolverse a la solución añadiendo y retirando varias veces del receptáculo para el concentrado cerca de 100 µl de disolución amortiguadora con la pipeta.

Almacenamiento

Los productos Vivapore deben almacenarse en un lugar seco entre 4° y 30°C.

Eliminación de desechos

Las unidades usadas se pueden incinerar o esterilizar en autoclave; los soportes se pueden reutilizar en sucesivas concentraciones.

Table 1: Technical specifications

	Vivapore 2	Vivapore 5	Vivapore 10 20
Membrane material	PES	PES	PES
Membrane MWCO	7,500	7,500	7,500
Membrane surface area	15 cm ²	20 cm ²	28 cm ²
Reservoir material	TPX, (PMP)	SAN	SAN
Volume range	0.5 - 2.5 ml/15 ml*	1 - 5 ml	2 - 10 ml/20 ml*
Minimum concentrate volume	20 µl	50 µl	50 µl
Vivapore overall dimensions			
Width (mm)	66	42	46
Height (mm)	68	82	100

* with additional reservoir

Table 2: Performance characteristics

Product	Time to concentrate up to 10x [min.]				Concentrate recovery %			
	VP2	VP5	VP10 20	VP10 20*	VP2	VP5	VP10 20	VP10 20*
Start volume	2 ml	5 ml	10 ml	20 ml	2 ml	5 ml	10 ml	20 ml
Cytochrome c (12,600 MW) 7,500 MWCO PES	0.25 mg/ml 35	0.25 mg/ml 35	0.25 mg/ml 75	0.1 mg/ml 150	0.25 mg/ml 90 %	0.25 mg/ml 90 %	0.25 mg/ml 90 %	0.1 mg/ml 92 %
BSA (66,000 MW) 7,500 MWCO PES	25	30	55	115	90 %	92 %	92 %	92 %
IgG (160,000 MW) 7,500 MWCO PES	35	40	70	160	76 %	75 %	77 %	78 %
	Time to concentrate up to 50x [min.]				Concentrate recovery %			
Cytochrome c (12,600 MW) 7,500 MWCO PES	65	70	160	-	91 %	88 %	90 %	-
BSA (66,000 MW) 7,500 MWCO PES	45	50	105	218	90 %	90 %	92 %	94 %
IgG (160,000 MW) 7,500 MWCO PES	50	65	140	290	53 %	65 %	74 %	70 %

* with additional reservoir

Table 3: Ordering information

	Pack size	Prod. no.	
Vivapore 2 Expandable to 15 ml with pipette reservoir 7,500 MWCO PES	30	VP0201	
Vivapore 5 Includes stand and recovery pipettes 7,500 MWCO PES	4	VP0503	
7,500 MWCO PES	30	VP0501	
Requires stand 7,500 MWCO PES	100	VP0502	
Vivapore 10 20 Includes stand and recovery pipettes 7,500 MWCO PES	4	VP2003	
7,500 MWCO PES	30	VP2001	
Requires stand 7,500 MWCO PES	100	VP2002	
Vivapore accessories			
Disposable stands for 4 units	6	VPA002	
Pipette reservoir (Vivapore 2)	50	VPA004	
Plastic recovery pipettes (Vivapore 10 20)		100	VPA005
10 ml expansion reservoir (Vivapore 10 20)	10	VPA006	
Plastic recovery pipettes (Vivapore 5)	100	VPA007	

Sartorius Stedim Biotech GmbH
August-Spindler-Strasse 11
37079 Goettingen, Germany
Phone +49.551.308.0
Fax +49.551.308.3289
www.sartorius-stedim.com

The information in this publication is believed to be accurate, and is offered in good faith for the benefit of the user. As we cannot anticipate or control conditions of product application, we do not warrant suitability or favourable results, nor that use will not infringe on any patents. Products are furnished upon the condition that the user assumes all risks and liabilities and that neither seller or manufacturer shall be liable for any loss or damage, direct or sequential arising from the use or inability to use the product.

Specifications subject to change without notice. Printed and copyrighted by Sartorius · W405.21
Publication No.: SLU6098-p08023